



TECNOLOGIA INOVADORA QUE TRANSFORMA VIDAS

Kit para artroscopia da ATM





o **Kit para Artroscopia da ATM**, a solução ideal para procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Desenvolvido com precisão e qualidade, este kit contém instrumentais médicos não implantáveis e não ativos, projetados para proporcionar eficiência e segurança em cada etapa da cirurgia.

Com o **Kit para Artroscopia da ATM**, você tem à disposição ferramentas perfeitas para perfuração, manipulação, corte e remoção de tecidos, músculos, articulações e fios de sutura. Todos os dispositivos são esterilizados por Óxido de Etileno (EtO), garantindo sua entrega em condição ESTÉRIL.

Para melhor atender às suas necessidades, **oferecemos quatro opções de kit**, cada uma desenhada para proporcionar:

- **Precisão:** Instrumentos precisos para resultados cirúrgicos impecáveis.
- **Conforto:** Ferramentas ergonômicas que facilitam o manuseio durante os procedimentos.
- **Menos Invasivo:** Soluções que minimizam o impacto cirúrgico e aceleram a recuperação do paciente.
- **Versatilidade:** Kits completos para atender a diversos tipos de procedimentos artroscópicos.

Opte pelo nosso kit e ofereça aos seus pacientes o que há de mais avançado em artroscopia da ATM, com a garantia de qualidade e inovação que sua prática merece!

Kit Exploration

Kit Essentials

Kit Anchor

Kit Ultimate

Kit Exploration

CÓDIGO
KATM-01



E60-001



E60-002




E60-005



E60-006

Instruções de Uso

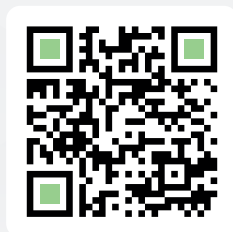

Registro ANVISA
nº: 10360939003

Kit Essentials

CÓDIGO
KATM-02



E60-001



E60-002



E60-003



E60-004



E60-005



E60-006

Instruções de Uso



Registro ANVISA
nº: 10360939003

Kit Anchor

CÓDIGO
KATM-03



E60-001

E60-002

E60-003

E60-004

E60-005

E60-006


E60-007

E60-008

E60-009

E60-010

Instruções de Uso

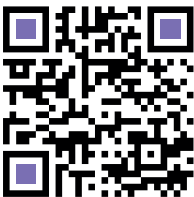

Registro ANVISA
nº: 10360939003

Kit Ultimate

CÓDIGO
KATM-04



E60-001

E60-002

E60-003

E60-004

E60-005

E60-006

E60-007

E60-008

E60-009

E60-010

E60-011

E60-012

Instruções de Uso



Registro ANVISA
nº: 10360939003

DETALHAMENTOS INSTRUMENTAIS

PONTA CORTANTE

para artroscopia de ATM



CÓDIGO
E60 - 001


COMPRIMENTO TOTAL
142 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta cortante, utilizado na perfuração inicial da pele e rompimento dos primeiros tecidos para acesso à cápsula articular.

PONTA ROMBA

para artroscopia de ATM

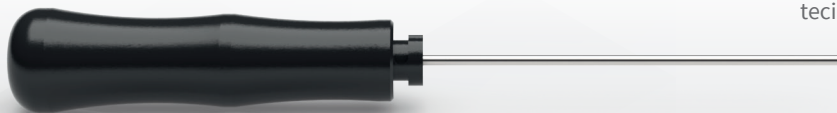

CÓDIGO
E60 - 002


COMPRIMENTO TOTAL
142 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta esférica não cortante, é utilizado após perfuração dos tecidos e músculos para rompimento da cápsula articular sem lesionar estruturas e tecidos moles.

PONTA GANCHO

para artroscopia de ATM

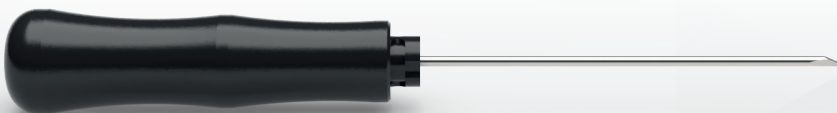

CÓDIGO
E60 - 003



COMPRIMENTO TOTAL
150 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo utilizado para manipulação intra-articular, com a finalidade de movimentar nervos, tendões e fios de sutura.

PONTA FACA

para artroscopia de ATM

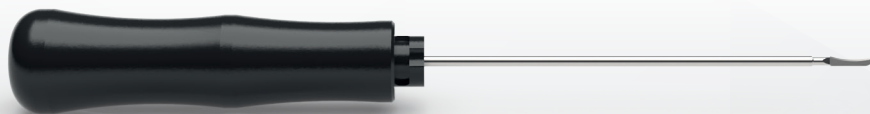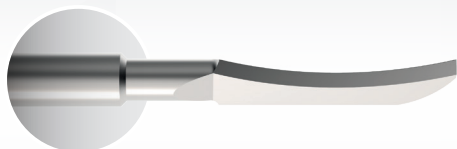

CÓDIGO
E60 - 004



COMPRIMENTO TOTAL
150 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com lâmina cortante, este instrumental permite o corte e rompimento de aderências intra-articulares e realizar capsulotomia e miotomia.

PONTA PALPADOR ANGULADA

para artroscopia de ATM

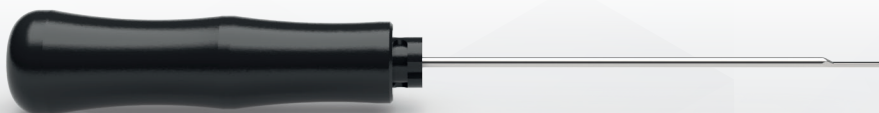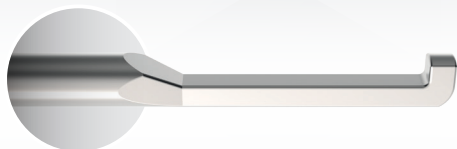

CÓDIGO
E60 - 005


COMPRIMENTO TOTAL
150 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com formato em L e sem arestas cortantes, permite a manipulação e exploração intra-articular sem lesionar estruturas e tecidos.

TROCATER

para artroscopia de ATM

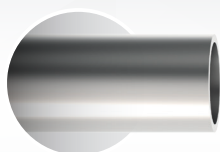

CÓDIGO
E60 - 006

COMPRIMENTO TOTAL
73 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø2.4 mm

Dispositivo para acesso guiado dos demais instrumentos cirúrgicos.

Este instrumental é inserido em uma das incisões feitas no(a) paciente. Dessa forma, os demais instrumentos cirúrgicos de artroscopia são guiados através da canula do trocater, acessando à ATM com precisão.

PINÇA DE BIÓPSIA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO
E60 - 007


COMPRIMENTO TOTAL
210,78 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.4 mm

Dispositivo com sistema de articulação abre-fecha, este instrumental é utilizado na remoção e coleta de material para biópsia sem lesiona-lo, garantindo a integridade do material orgânico a ser examinado.

PINÇA DE CAPTURA DE DISCO

para artroscopia de ATM

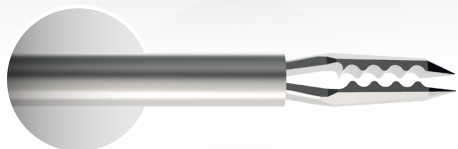

CÓDIGO
E60 - 008

COMPRIMENTO TOTAL
210,8 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo contendo pinça articulada para capturar tecidos, disco e fios de sutura. Sua ponta permite a perfuração de tecidos e músculos sem lesionar a região, facilitando a manipulação intra-articular.

TESOURA

para artroscopia de ATM



CÓDIGO
E60 - 009

COMPRIMENTO TOTAL
210,8 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com função de tesoura cortante, é indicado para o rompimento de aderências e na realização de capsulotomia e miotomia.

AGULHA DE INFILTRAÇÃO

para artroscopia de ATM



CÓDIGO
E60 - 010



COMPRIMENTO TOTAL
118,5 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.5 mm

Dispositivo utilizado para inserção de fios de sutura ou administração de medicamentos líquidos pertinentes ao procedimento.

PINÇA LAÇO DE CAPTURA

para artroscopia de ATM

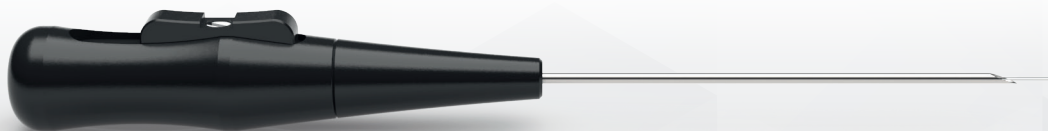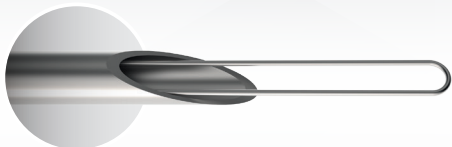

CÓDIGO
E60 - 011



COMPRIMENTO TOTAL
171 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com fio metálico em formato de laço e sistema abre-fecha linear. É utilizado na captura dos fios de sutura.

PINÇA GANCHO

para artroscopia de ATM

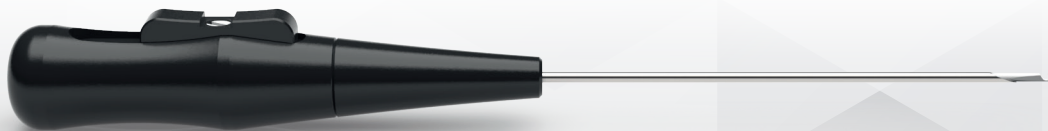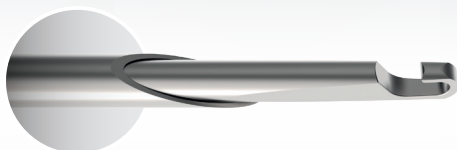

CÓDIGO
E60 - 012

COMPRIMENTO TOTAL
171 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta em forma de gancho e sistema abre-fecha linear. É utilizado na captura dos fios de sutura.



www.artfiximplants.com.br

