



Kit para Artroscopia da ATM

Máxima Tecnologia para ser Minimamente Invasivo.





Kit para Artrosopia da ATM.

Máxima Tecnologia para ser Minimamente Invasivo.

O **Kit para Artrosopia da ATM ARTFIX** foi desenvolvido para atender aos mais altos padrões de precisão, segurança e desempenho em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos da articulação temporomandibular.

Composto por instrumentais cirúrgicos não implantáveis e não ativos, o kit foi projetado para oferecer eficiência em todas as etapas cirúrgicas, possibilitando perfuração, manipulação, corte e remoção de tecidos, músculos, articulações e fios de sutura com máximo controle e confiabilidade.

Todos os dispositivos são esterilizados por Óxido de Etileno (EtO) e entregues em condição estéril, assegurando qualidade, rastreabilidade e conformidade com os requisitos regulatórios.

O Kit para Artrosopia da ATM oferece:

PRECISÃO: Instrumentais projetados para controle cirúrgico e resultados consistentes.

ERGONOMIA: Design que favorece o manuseio e a fluidez do procedimento.

MINIMAMENTE INVASIVO: Soluções que reduzem o trauma cirúrgico e contribuem para uma recuperação mais eficiente.

VERSATILIDADE: Conjuntos completos para diferentes abordagens artroscópicas da ATM.





Kits em Quatro Versões.

Uma Solução Completa para Cada Necessidade.


Os Kits para Artroscopia da ATM ARTFIX estão disponíveis em quatro versões — Essentials, Exploration, Anchor e Ultimate — desenvolvidas para atender diferentes níveis de complexidade cirúrgica, mantendo precisão, segurança e performance em cada procedimento.



Kit Exploration	Kit Essentials	Kit Anchor	Kit Ultimate
			
Instruções de Uso ANVISA nº: 10360939003	Instruções de Uso ANVISA nº: 10360939005	Instruções de Uso ANVISA nº: 10360939002	Instruções de Uso ANVISA nº: 10360939004

PONTA CORTANTE

para artroscopia de ATM

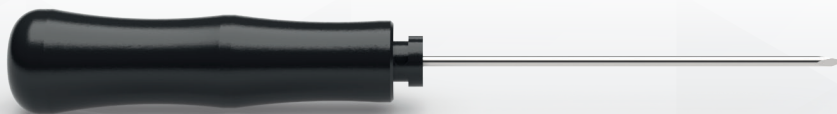

KIT EXPLORATION

KIT ESSENTIALS

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 001

COMPRIMENTO TOTAL
142 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta cortante, utilizado na perfuração inicial da pele e rompimento dos primeiros tecidos para acesso à cápsula articular.

PONTA ROMBA

para artroscopia de ATM



KIT EXPLORATION

KIT ESSENTIALS

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 002


COMPRIMENTO TOTAL
142 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta esférica não cortante é utilizado após perfuração dos tecidos e músculos para rompimento da cápsula articular sem lesionar estruturas e tecidos moles.

PONTA GANCHO

para artroscopia de ATM

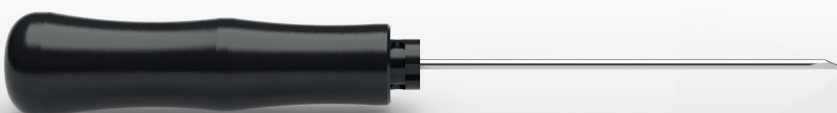

KIT ESSENTIALS

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 003



COMPRIMENTO TOTAL
150 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo utilizado para manipulação intra-articular, com a finalidade de movimentar nervos, tendões e fios de sutura.

PONTA FACA

para artroscopia de ATM

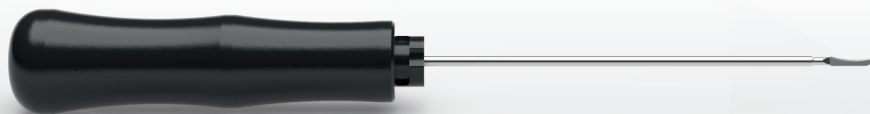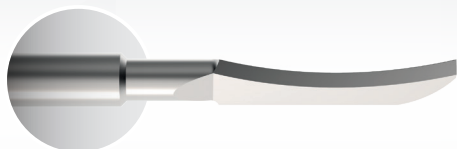

KIT ESSENTIALS

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 004



COMPRIMENTO TOTAL
150 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com lâmina cortante. Este instrumental permite o corte e rompimento de aderências intra-articulares e realizar capsulotomia e miotomia.

PONTA PALPADOR ANGULADA

para artroscopia de ATM

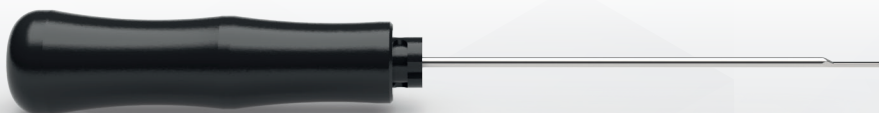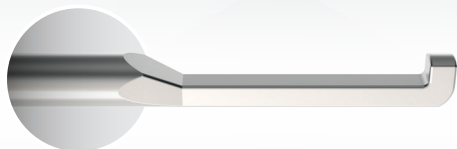

KIT EXPLORATION

KIT ESSENTIALS

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 005


COMPRIMENTO TOTAL
150 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com formato em L e sem arestas cortantes, permite a manipulação e exploração intra-articular sem lesionar estruturas e tecidos.

TROCATER

para artroscopia de ATM

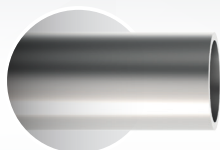

KIT EXPLORATION

KIT ESSENTIALS

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 006

COMPRIMENTO TOTAL
73 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø2.4 mm

Dispositivo para acesso guiado dos demais instrumentos cirúrgicos. Este instrumental é inserido em uma das incisões feitas no(a) paciente. Dessa forma, os demais instrumentos cirúrgicos de artroscopia são guiados através da cânula do trocater, acessando à ATM com precisão.

PINÇA DE BIÓPSIA

para artroscopia de ATM



KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 007


COMPRIMENTO TOTAL
210,78 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.4 mm

Dispositivo com sistema de articulação abre-fecha. Este instrumental é utilizado na remoção e coleta de material para biópsia sem lesioná-lo, garantindo a integridade do material orgânico a ser examinado.

PINÇA DE CAPTURA DE DISCO

para artroscopia de ATM

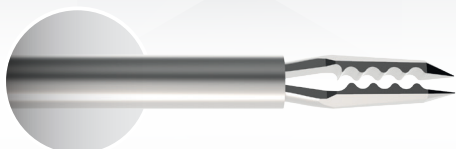

KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 008

COMPRIMENTO TOTAL
210,8 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo contendo pinça articulada para capturar tecidos, disco e fios de sutura. Sua ponta permite a perfuração de tecidos e músculos sem lesionar a região, facilitando a manipulação intra-articular.

TESOURA

para artroscopia de ATM



KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 009

COMPRIMENTO TOTAL
210,8 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com função de tesoura cortante é indicado para o rompimento de aderências e na realização de capsulotomia e miotomia.

AGULHA DE INFILTRAÇÃO

para artroscopia de ATM



KIT ANCHOR

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 010


COMPRIMENTO TOTAL
118,5 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.5 mm

Dispositivo utilizado para inserção de fios de sutura ou administração de medicamentos líquidos pertinentes ao procedimento.

PINÇA LAÇO DE CAPTURA

para artroscopia de ATM

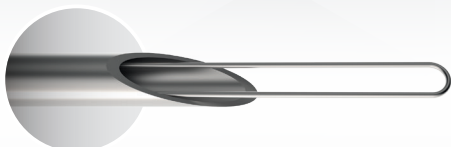

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 011


COMPRIMENTO TOTAL
171 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com fio metálico em formato de laço e sistema abre-fecha linear. É utilizado na captura dos fios de sutura.

PINÇA GANCHO

para artroscopia de ATM

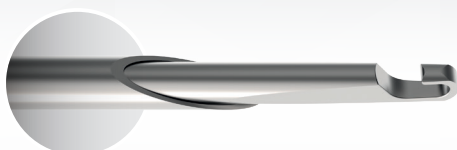

KIT ULTIMATE

CÓDIGO
E60 - 012

COMPRIMENTO TOTAL
171 mm

DIÂMETRO PONTA
Ø1.8 mm

Dispositivo com ponta em forma de gancho e sistema abre-fecha linear. É utilizado na captura dos fios de sutura.



REABILITAR É A NOSSA ARTE!

R. Tomazina, 112, Emiliano Pernetá, Pinhais - PR - Brasil
E-mail: comercial@enterprises.com.br | Tel.: (41) 3039-2594
www.artfiximplants.com.br

